






Latex-Free Transducer Covers








CIV-Flex™ • NeoGuard™ • iVAS™ • Poly • Surgi™ • Surgi-Tip™








REFERENCE GUIDE









CE
0120

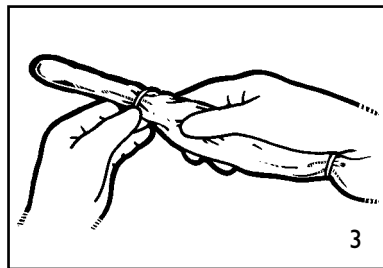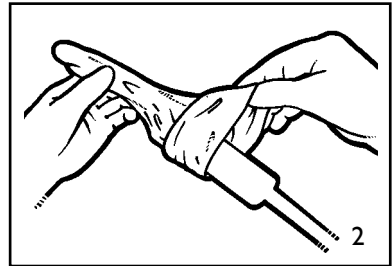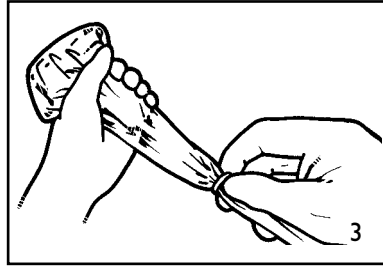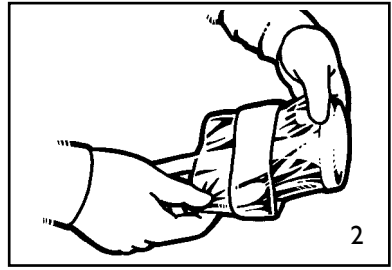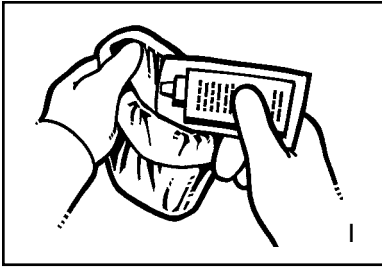

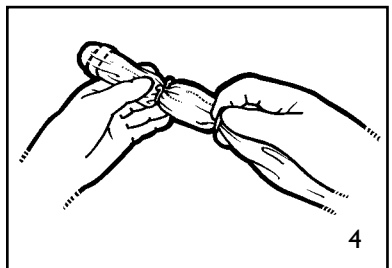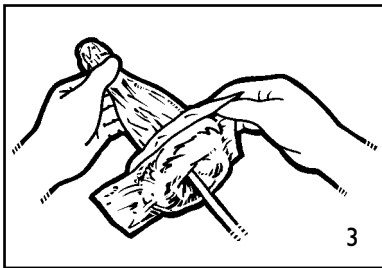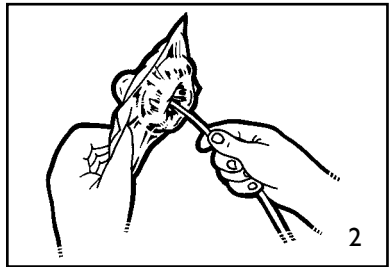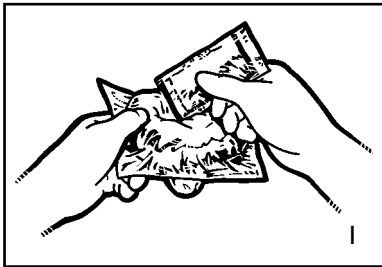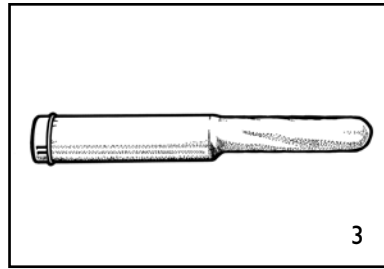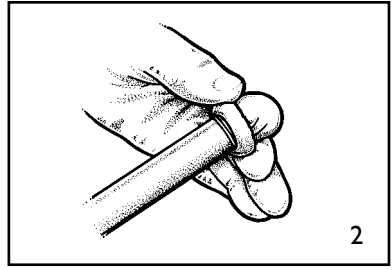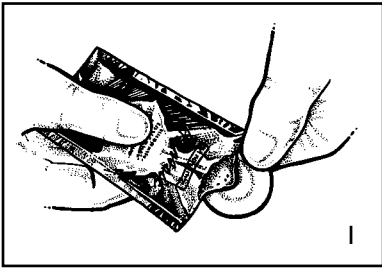

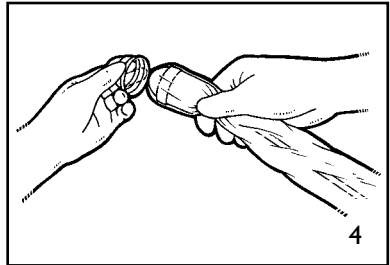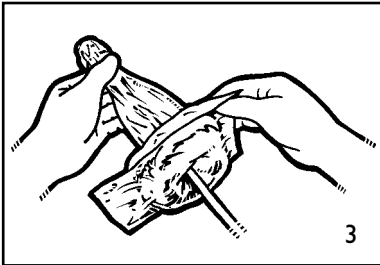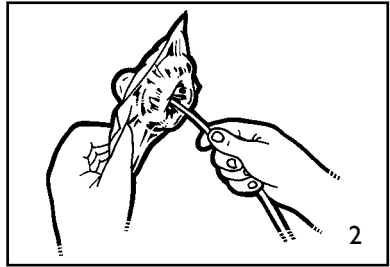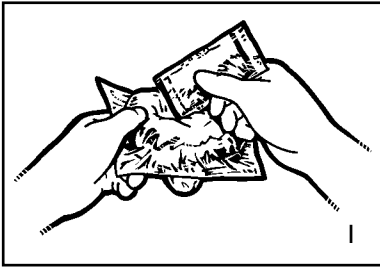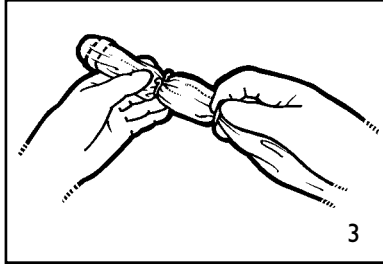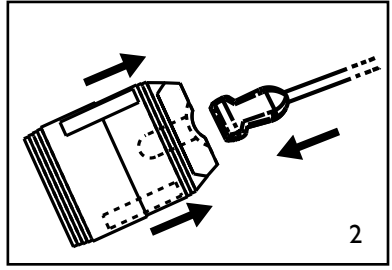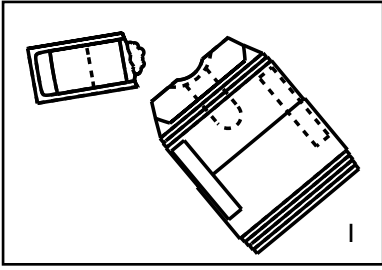

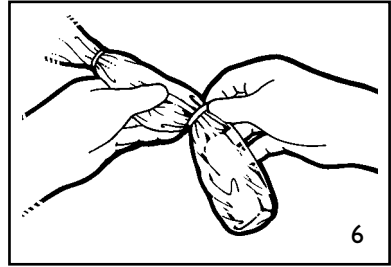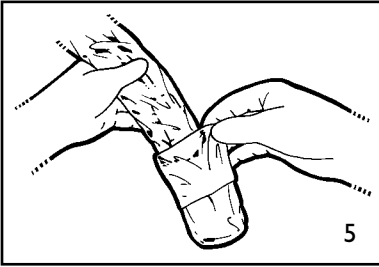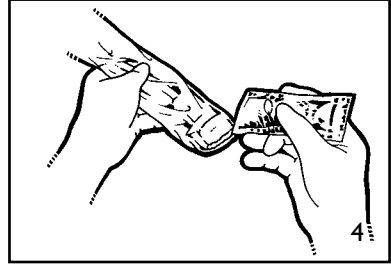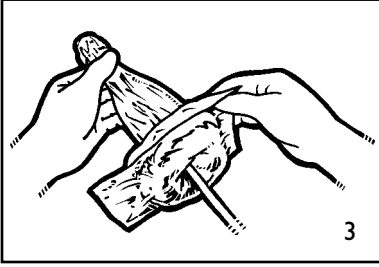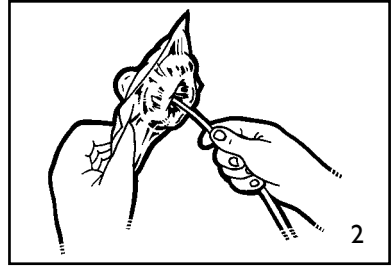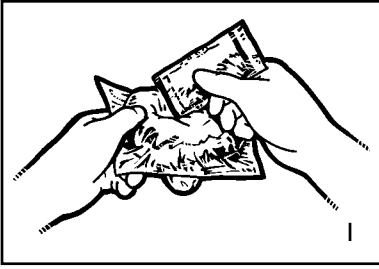

INTENDED USE

- The cover allows use of the transducer in scanning and needle guided procedures for body surface, endocavity and intra-operative diagnostic ultrasound, while helping to prevent transfer of microorganisms, body fluids and particulate material to the patient and health care worker during reuse of the transducer.

WARNING

- *In the USA, federal law restricts device to sale or use by or on order of a physician.*
- *Before use, you should be trained in ultrasonography. For instructions on the use of your transducer, see your system's manual.*
- *Dispose of single-use components as infectious waste.*
- *See your system's manual for reprocessing transducer between use.*

Covering the Transducer and Bracket

WARNING

- *Use only water-soluble agents or gels. Petroleum or mineral oil based materials may harm cover.*
- *Disposable components are packaged sterile and are single-use only. Do not use if integrity of packaging is violated or if expiration date has passed.*
- *For illustration purposes only, transducer may be shown without a transducer cover. Always place a cover over transducer to protect patients and users from cross-contamination.*

1. Place an appropriate amount of gel inside cover and/or on transducer face. Poor imaging may result if no gel is used.
2. Insert transducer into cover making sure to use proper sterile technique. Pull cover tightly over transducer face to remove wrinkles and air bubbles, taking care to avoid puncturing cover.
3. Secure cover with enclosed bands (if applicable).
4. Inspect cover to ensure there are no holes or tears.

**ANVENDELSESFORMÅL**

- Overtrækket muliggør anvendelse af transduceren til scanning og nålstyrede procedurer på overfladen af kroppen, ved endoskopi og intraoperativ diagnostisk ultralyd mens det samtidigt hjælper med at forhindre overførsel af mikroorganismer, kropsvæsker og partikler til patienten og sundhedshjælperen under gentagen brug af transduceren.

ADVARSEL

- *I henhold til amerikansk lovgivning må salg eller anvendelse af apparatet kun foretages af en læge eller efter lægeordination.*
- *Før anvendelse bør du have deltaget i undervisning i ultrasonografi. Vejledning i brugen af din transducer findes i din systemmanual.*
- *Bortkast engangskomponenter som smitsomt affald.*
- *Se din systembrugervejledning for efterbehandling af transduceren mellem anvendelser.*

Tildækning af transduceren og holderen**ADVARSEL**

- *Brug kun vandopløselige midler eller geler. Jordolie eller mineralske oliebaserede materialer kan skade overtrækket.*
- *Engangskomponenter er pakket sterilt og må kun anvendes én gang. Undgå at anvende dem, hvis du har mistanke om, at pakken har været åbnet, eller hvis udløbsdatoen er overskredet.*
- *Til demonstrationsbrug kan transduceren fremvises uden overtrækket. Anbring altid et overtræk over transduceren for at beskytte patienter og brugere imod krydskontaminering.*

1. Påfør en passende mængde gel på indersiden af overtrækket og/eller på transducerhovedet. Billedkvaliteten kan blive forringet, hvis der ikke anvendes gel.
2. Isæt transduceren i overtrækket, idet du sørger for at anvende passende steril teknik. Træk overtrækket stramt over transducerhovedet for at undgå rynker og luftbobler, idet du sørger for at undgå perforering af overtrækket.
3. Overtrækket fastgøres med de vedlagte bånd (hvis passende).
4. Kontroller overtrækket for at sikre, at der ikke er nogen huller eller revner.

BEOOGD GEBRUIK

- De hoes biedt de mogelijkheid van gebruik van de transducer bij scannen en naaldgeleide procedures voor lichaamsoppervlakken, binnenholtes en intra-operatief diagnostisch ultrasoongeluid, terwijl het helpt bij het voorkomen van de overdracht van micro-organismen, lichaamsvloeistoffen en corpusculaire materialen naar de patiënt en gezondheidzorgwerker tijdens hergebruik van de transducer.

WAARSCHUWING

- *In de VS beperkt de federale wet dit apparaat tot verkoop of gebruik door of in opdracht van een arts.*
- *Voor gebruik, moet u worden geschoold in ultrasonografie. Voor instructies over het gebruik van uw transducer, zie uw systeemhandleiding.*
- *Verwijder componenten voor eenmalig gebruik als infectie-afval.*
- *Zie uw systeemhandleiding voor het recycleren van de transducer tussen de gebruiksperiodes.*

Afdekken van de transducer en beugel _____**WAARSCHUWING**

- *Gebruik alleen in water oplosbare middelen of gels. Petroleum of op minerale olie gebaseerde materialen kunnen de hoes beschadigen.*
- *Wegwerpcomponenten zijn steriel verpakt en zijn alleen voor eenmalig gebruik. Niet gebruiken indien de integriteit van verpakking is beschadigd of indien de vervaldatum is gepasseerd.*
- *Alleen voor illustratiedoeleinden, kan de transducer worden getoond zonder een transducerhoes. Plaats altijd een hoes over de transducer om patiënten en gebruikers tegen kruiscontaminatie te beschermen.*

1. Plaats een passende hoeveelheid gel binnenin de hoes en/of op het transduceroppervlak. Slechte beelden kunnen het resultaat zijn, indien geen gel wordt gebruikt.
2. Zet de transducer in de hoes en overtuig u ervan dat u de juiste steriele techniek gebruikt. Trek de hoes stevig over het transduceroppervlak om kreukels en luchtbellens te verwijderen, waarbij u ervoor moet zorgen dat de hoes niet doorgeprikt wordt.
3. Zet de hoes vast met de meegeleverde banden (Indien van toepassing).
4. Inspecteer de hoes om te verzekeren dat er geen gaten of scheuren zijn.

KÄYTTÖTARKOITUS

- Suojus mahdollistaa ultraäänianturin käytön läpivalaisussa ja neulalla ohjatuissa toimenpiteissä kehon pintaan, ontelonsisäisesti sekä leikkauksenaikaisessa ultraäänitutkimuksessa. Lisäksi suojus auttaa estämään mikro-organismien, kehon nesteiden ja hiukkasaineiden siirtymisen potilaaseen ja hoitohenkilökuntaan anturia käytettäessä uudelleen.

VAROITUS

- *Liittovaltion (USA) lait sallivat laitteen myynnin ainoastaan lääkärille tai lääkärin määräyksestä.*
- *Ennen laitteen käyttöä on varmistettava, että käyttäjä on käynyt kaikukuvaukseen liittyvän koulutuksen. Katso ohjeet ultraäänianturin käyttöön , järjestelmän käyttöohjeista.*
- *Hävitä kertakäyttöiset osat tartuntajätteenä.*
- *Katso järjestelmän käyttöoppaasta ohjeet ultraäänianturin uudelleenkäsittelyyn käyttökertojen välissä.*

Ultraäänianturin ja kannattimen suojaaminen

VAROITUS

- *Käytä ainoastaan vesiliukoisia aineita tai geelejä. Öljy- tai mineraaliöljypohjaiset materiaalit voivat vahingoittaa suojusta.*
- *Hävittävät osat on pakattu steriileinä ja tarkoitettu ainoastaan kertakäyttöön. Älä käytä, jos pakkaus ei ole ehjä tai jos viimeinen käyttöpäivämäärä on ohitettu.*
- *Ultraäänianturia voidaan käyttää ilman suojusta ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa. Potilaiden ja käyttäjien suojaamiseksi ristikäytännöllä, on ultraäänianturin päällä aina pidettävä suojusta.*

1. Laita suojuksen sisälle ja/tai ultraäänianturin päälle sopiva määrä geeliä. Jos geeliä ei käytetä, kuvasta voi tulla huonolaatuinen.
2. Aseta ultraäänianturi suojuksen sisään varmistaen, että käytetään asianmukaista steriiliä menetelmää. Vedä suojus tiukasti anturin päälle poistaaksesi rypyt ja ilmakuplat, varoen puhkomasta suojusta.
3. Kiinnitä suojus mukana olevilla nauhoilla (jos mahdollinen).
4. Tarkista suojus varmistaaksesi, että siinä ei ole reikiä tai repeytymiä.

APPLICATION

- L'enveloppe permet l'utilisation du transducteur pour la scanographie et les examens guidés par aiguille pour la surface corporelle, les cavités internes et l'échographie diagnostique peropératoire, tout en contribuant à empêcher le transfert de micro-organismes, liquides corporels et matières particulaires au patient et au personnel de soins de santé lors de la réutilisation du transducteur.

AVERTISSEMENT

- *Aux États-Unis, la réglementation fédérale restreint la vente ou l'utilisation de ce dispositif à un médecin ou sur l'ordonnance de celui-ci.*
- *Avant utilisation, suivre une formation sur l'ultrasonographie. Pour des instructions relatives à l'utilisation du transducteur, voir le mode d'emploi de l'appareil.*
- *Mettre au rebut les composants à usage unique comme déchets infectieux.*
- *Consulter le manuel du système pour plus d'informations sur le retraitement du transducteur entre chaque utilisation.*

Enveloppement du transducteur et du bracelet _____

AVERTISSEMENT

- *Uniquement utiliser des agents ou gels solubles dans l'eau. Les matériaux à base de pétrole ou d'huile minérale peuvent endommager l'enveloppe.*
- *Les éléments jetables sont emballés stérilement et destinés à un usage unique exclusivement. Ne pas utiliser si l'intégrité de l'emballage a été compromise ou si la date de péremption est dépassée.*
- *Le transducteur est montré sans enveloppe uniquement pour l'illustration. Toujours placer l'enveloppe sur le transducteur pour protéger les patients et les utilisateurs de toute contamination croisée.*

1. Placer une quantité appropriée de gel à l'intérieur de l'enveloppe et/ou sur la façade du transducteur. L'absence de gel peut produire une image de mauvaise qualité.
2. Insérer le transducteur dans l'enveloppe en veillant à utiliser une technique stérile adaptée. Doucement tirer l'enveloppe sur la façade du transducteur pour retirer les plis et les bulles d'air, en prenant soin d'éviter de la percer.
3. Fixer l'enveloppe avec les bandes jointes (le cas échéant).
4. Inspecter l'enveloppe pour s'assurer qu'elle ne comporte aucune perforation ou déchirure.

GEBRAUCHSZWECK

- Die Schutzhülle ermöglicht die Anwendung des Schallkopfes beim Scannen und bei mit Nadeln durchgeführten Verfahren auf der Körperoberfläche, in den Körperhöhlen und bei intraoperativen Ultraschalluntersuchungen, und verhindert die Übertragung von Mikroorganismen, Körperflüssigkeiten und Partikeln zwischen Patient und Personal bei der Wiederverwendung des Schallkopfes.

WARNHINWEIS

- *Nach US-amerikanischem Recht darf das Gerät nur von einem Arzt oder in dessen Auftrag erworben werden.*
- *Vor Gebrauch müssen Sie in Ultrasonographie geschult werden. Anweisungen zur Benutzung des Schallkopfes befinden sich in Ihrem Systemhandbuch.*
- *Die Einwegkomponenten müssen als infektiöser Abfall entsorgt werden.*
- *Zur Bearbeitung des Schallkopfes zwischen den Anwendungen konsultieren Sie bitte Ihr Systemhandbuch.*

Schutzhülle des Schallkopfes und des Halters _____

WARNHINWEIS

- *Nur wasserlösliche Mittel oder Gele verwenden. Materialien auf Petrol- oder Mineralölbasis können der Schutzhülle schaden.*
- *Die Einwegkomponenten sind steril verpackt und nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt oder das Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist.*
- *Zu Illustrationszwecken kann der Schallkopf auch ohne Schutzhülle abgebildet sein. Der Schallkopf muss immer abgedeckt werden, um Patienten und Bediener vor Kreuzkontamination zu schützen.*

1. Eine ausreichende Menge Gel auf die Innenseite der Schutzhülle und/oder auf die Schallkopf-Oberfläche geben. Wenn kein Gel verwendet wird, könnte eine schlechte Bildgebung die Folge sein.
2. Den Schallkopf mit der ordnungsgemäßen sterilen Technik in die Schutzhülle setzen. Die Schutzhülle fest über die Schallkopf-Oberfläche ziehen, um Falten und Luftbläschen zu entfernen. Die Schutzhülle darf dabei nicht punktiert werden.
3. Die Schutzhülle mit den mitgelieferten Gummibändern sichern (falls vorhanden).
4. Die Schutzhülle auf Löcher oder Risse hin untersuchen.

ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

- Το κάλυμμα επιτρέπει τη χρήση του μορφοτροπέα σε επεμβάσεις ανίχνευσης και με καθοδηγούμενη βελόνα για την επιφάνεια του σώματος, τις ενδοκοιλότητες και τους ενδοχειρουργικούς διαγνωστικούς υπέρηχους, ενώ αποτρέπει τη μετάδοση των μικροοργανισμών, των σωματικών υγρών και των σωματιδίων στον ασθενή και στο ιατρικό προσωπικό κατά την επαναληπτική χρήση του μορφοτροπέα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η ομοσπονδιακή νομοθεσία των Η.Π.Α. περιορίζει την πώληση ή τη χρήση της συσκευής αυτής μόνον από ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού.
- Πριν από τη χρήση, θα πρέπει να έχετε εκπαιδευτεί στην υπερηχογραφία. Για οδηγίες χρήσης του μορφοτροπέα σας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του συστήματός σας.
- Διαθέστε τα στοιχεία μίας χρήσης ως μολυσματικά απόβλητα.
- Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του συστήματός σας για την επανεπεξεργασία του μορφοτροπέα μεταξύ των χρήσεων.

Κάλυψη του Μορφοτροπέα και του Πλαισίου

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Χρησιμοποιείτε μόνο υδατοδιαλυτές ουσίες ή τζελ. Οι ουσίες με βάση πετρελαίου ή ορυκτέλαιων μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στο κάλυμμα.
- Τα στοιχεία μίας χρήσης διατίθενται σε αποστειρωμένες συσκευασίες και προορίζονται για μία μόνο χρήση. Μην τα χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία τους έχει παραβιαστεί ή εάν έχει υπερβεί την ημερομηνία λήξης της.
- Για λόγους απεικόνισης μόνο, ο μορφοτροπέας μπορεί να απεικονίζεται χωρίς το κάλυμμα μορφοτροπέα. Φροντίστε να τοποθετείτε πάντα το κάλυμμα στο μορφοτροπέα, για να αποφύγετε τη διασταυρούμενη μόλυνση των ασθενών και των χρηστών της συσκευής.

1. Τοποθετήστε την κατάλληλη ποσότητα τζελ μέσα στο κάλυμμα ή/ και στην πρόσοψη του μορφοτροπέα. Αν δεν χρησιμοποιήσετε τζελ, η εικόνηση ενδέχεται να είναι χαμηλής ποιότητας.
2. Εισάγετε το μορφοτροπέα στο κάλυμμα, εξασφαλίζοντας ότι κάνετε χρήση της κατάλληλης στείρας τεχνικής. Εφαρμόστε το κάλυμμα σφιχτά στην πρόσοψη του μορφοτροπέα για να εξαλείψετε τις πτυχώσεις και τις φυσαλίδες αέρος, προσέχοντας να μην τρυπήσετε το κάλυμμα.
3. Ασφαλίστε το κάλυμμα με τις ταινίες που παρέχονται (εάν προβλέπεται).
4. Επιθεωρήστε το κάλυμμα, για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν οπές ή σκισίματα.

**DESTINAZIONE D'USO**

- La guaina consente di usare il trasduttore in procedure di scansione ecografica e con ago ecoguidato per la diagnostica ultrasonografica della superficie corporea, endocavitaria e intraoperatoria, contribuendo nel contempo a prevenire la trasmissione di microrganismi, fluidi corporei e particolati al paziente e all'operatore sanitario durante il riutilizzo del trasduttore.

AVVERTENZA

- *Negli Stati Uniti, la legge federale limita la vendita o l'uso del presente dispositivo ai soli medici o dietro prescrizione medica.*
- *L'operatore addetto all'uso deve essere in possesso di formazione specifica in ultrasonologia. Per le istruzioni relative all'utilizzo del trasduttore, consultare il manuale del proprio sistema.*
- *Smaltire i componenti usa e getta come rifiuti infettivi.*
- *Per la rigenerazione del trasduttore tra un uso e l'altro, consultare il manuale del sistema.*

Rivestimento del trasduttore e del supporto_____**AVVERTENZA**

- *Utilizzare unicamente agenti o gel idrosolubili. Materiali derivati dal petrolio o a base di olio minerale possono danneggiare la guaina.*
 - *I componenti usa e getta vengono confezionati sterili e sono esclusivamente monouso. Non utilizzare se l'integrità della confezione è stata compromessa o se la data di scadenza è stata superata.*
 - *È possibile che, unicamente a scopo illustrativo, il trasduttore venga mostrato senza guaina. Coprire sempre il trasduttore con la guaina in modo da proteggere pazienti e utenti da contaminazione crociata.*
1. Collocare una quantità appropriata di gel all'interno della guaina e/o sulla superficie del trasduttore. Se non si utilizza il gel, possono risultare immagini di scarsa qualità.
 2. Inserire il trasduttore nella guaina seguendo la tecnica sterile appropriata. Stendere bene la guaina sulla superficie del trasduttore, rimuovendo pieghe e bolle d'aria e evitando accuratamente di forarla.
 3. Fissare la guaina con le strisce incluse (se presente).
 4. Verificare che la guaina sia priva di fori o lacerazioni.

用途

- ・本カバーは体表面、体腔内、および術中超音波診断でのスキャンングや穿刺ガイド手技においてトランスデューサを用いる際に使用します。また、トランスデューサを再使用する際に微生物や体液、粒子物質が患者および医療従事者に移入するのを防止します。

警告

- ・米国連邦法により、本製品の販売または使用は、医師または医師の指示による場合に制限されています。
- ・使用前に、超音波検査法の訓練を受ける必要があります。トランスデューサ使用の説明は、装置の使用マニュアルを参照します。
- ・使い捨て部品は感染性廃棄物として処分します。
- ・使用毎にトランスデューサを再処理するには、システムマニュアルを参照します。

トランスデューサとブラケットをカバーする _____

警告

- ・水溶性造影剤またはジェル以外は使用しないでください。石油または鉱物油ベースの物質はカバーを痛めるおそれがあります。
- ・ディスプレイ部品は滅菌包装されていますので、再使用しないでください。包装が破損・不完全な場合、または使用期限を過ぎている場合は、使用しないでください。
- ・説明のために、トランスデューサはカバーなしで示す場合があります。実際の場合は常に患者や使用者を二次感染から守るため、機器にカバーをつけてください。

1. カバー内部またはトランスデューサ表面上に適量のジェルをつけます。ジェルを使用しないと造影効果が悪化します。
2. 適切な無菌技術を確実に使用して、トランスデューサをカバーに挿入します。トランスデューサ表面にカバーをかぶせて、強く引っ張り、しわや気泡がないようにします。この際、カバーを穿孔しないよう注意します。
3. 同封のバンドでカバーを固定しします（該当する場合）。
4. カバーを点検して穴や破れがないか確認しします。

BEREGNET BRUK

- Kappen gjør det mulig å bruke transducere til scanning og nålstyrte ultralydundersøkelser på kroppsoverflater, kroppshulrom og intraoperativt, samtidig som overføring av mikroorganismer, kroppsvæsker eller partikler til pasient eller helsepersonell forhindres ved gjenbruk av transducere.

ADVARSEL

- I USA kan dette utstyret bare selges av eller etter henvisning fra lege.
- Før bruk skal du være opplært i gjennomføring av ultralydundersøkelser. Se håndboken for ultralydsystemet for å finne, nærmere informasjon om bruken av transducere.
- Engangskomponenter skal behandles som smittefarlig avfall.
- Se håndboken for systemet for å finne informasjon om behandling av transducere mellom hver gangs bruk.

Slik settes kappen på transducer og brakett _____

ADVARSEL

- Bruk bare vannløselige midler eller geler. Materialer som er basert på petroleum eller mineralolje kan være til skade for kappen.
- Engangskomponenter er pakket sterilt og skal bare brukes en gang. Skal ikke brukes hvis innpakningen er brutt eller de er gått ut på dato.
- Transducere kan være avbildet uten transducerkappe (kun som en illustrasjon). Plassér alltid en kappe over transducere for å beskytte pasienter og brukere mot krysskontaminasjon.

1. Påfør en passende mengde gel inne i kappen og/eller på transducerhodet. Hvis det ikke brukes gel kan dette føre til dårlig avbildning.
2. Sett transducere inn i kappen og pass på at det benyttes aseptisk teknikk. Trekk kappen stramt over transducerhodet slik at folder og luftbobler blir borte samtidig som man unngår at det går hull i kappen.
3. Fest kappen med de medfølgende stroppene (hvis anvendelig).
4. Undersøk overtrekket for å være sikker på at det ikke er hull eller rifter.



UTILIZAÇÃO

- A cobertura permite a utilização do transdutor no exame e nos procedimentos de orientação da agulha na superfície do corpo, endocavidade e ultra-sons de diagnóstico intra-operativo, ajudando ao mesmo tempo a evitar a transferência de microorganismos, fluidos corporais e outros materiais para o paciente e prestador de cuidados de saúde durante a reutilização do transdutor.

AVISO

- *A lei federal dos EUA limita este dispositivo a venda por ou com a autorização de um médico.*
- *Antes da utilização, deve obter a formação em ultra-sonografia. Para obter instruções sobre a utilização do transdutor, consulte o manual do sistema.*
- *A eliminação de componentes de uma única utilização deve ser efectuada como lixo contaminado.*
- *Consultar o manual do sistema sobre reprocessamento do transdutor entre utilizações.*

Cobrir o Transdutor e Suporte

AVISO

- *Utilizar apenas agentes ou gel hidrossolúveis. Materiais à base de petróleo ou óleo mineral podem danificar a cobertura.*
- *Os componentes descartáveis são embalados esterilizados e são apenas para uma única utilização. Não utilizar se a integridade da embalagem tiver sido violada ou se a data de validade tiver sido ultrapassada.*
- *Apenas para efeitos de ilustração, o transdutor pode ser mostrado sem cobertura. Colocar sempre a cobertura sobre o dispositivo para proteger os pacientes e utilizadores de contaminação cruzada.*

1. Colocar uma quantidade adequada de gel no interior da cobertura e/ou na face do transdutor. Se não for usado gel, pode dar origem a uma fraca qualidade de imagem.
2. Inserir o transdutor na cobertura assegurando que utiliza a técnica estéril adequada. Empurre firmemente a cobertura sobre o transdutor para remover rugas e bolhas de ar, tendo o cuidado de evitar furar a cobertura.
3. Prender a cobertura com as bandas fornecidas (se aplicável).
4. Inspeccionar a cobertura para assegurar que não há furos ou rasgos.

设计用途

- 护套便于医生在扫描和针导手术中将探头用于体表、腔内和术中超声波诊断，同时也有助于在重复使用探头的过程中，防止微生物、体液和颗粒物转移到患者或医护人员的身上。

警告

- 美国联邦法律规定：本器械只能由医生销售、使用或订购。
- 使用之前，您必须接受超声波检查培训。如需了解探头的使用说明，请参阅系统手册。
- 将一次性部件当作受污染废物处理。
- 请参阅系统手册，了解如何再次处理使用过的探头。

套住探头和托架

警告

- 只使用水溶性助剂或凝胶。石油性物质或矿物油性物质可能损害护套。
- 一次性部件均为无菌包装，只能使用一次。如果包装受损或超过有效期，请勿使用。
- 为便于说明问题，图中的探头可能没有配备护套。记得始终给探头套上护套，使患者和使用者免于交叉感染。

1. 在护套内部和/或探头表面涂上适量凝胶。不用凝胶可能影响成像效果。
2. 将探头插入护套，请确保使用正确的消毒方法。拉紧护套，使其紧贴在探头表面，使护套不起皱褶，也不留气泡，注意不要刺穿护套。
3. 用随附的带子固定护套（在适当的情况下）。
4. 检查护套，确保没有小孔或破损。

.....

AVSEDD ANVÄNDNING

- Skyddet tillåter användning av transduktorn vid skanning och nålstyrda procedurer för kroppsyta, ändkaviteter och intraoperativa diagnostiska ultraljud genom att hjälpa till att förhindra överföring av mikroorganismer, kroppsvätskor och partikelmaterial till patienten och vårdpersonal under förnyad användning av transduktorn.

VARNING!

- *I USA begränsar federala lagar enheten till försäljning eller användning av eller på beställning av läkare.*
- *Före användning måste du utbildas i ultrasonografi. Se systemets handbok för anvisningar om användning av transduktorn.*
- *Avyttra engångskomponenter som infektiöst avfall.*
- *Information om återställning av transduktorn mellan användningstillfällen finns i handboken till systemet.*

Skydda transduktorn och konsolen _____**VARNING!**

- *Använd enbart vattenlösliga medel eller gel. Petroleum- eller mineraloljebaserade material kan skada skyddet.*
- *De komponenter som kan slängas är sterilt förpackade och endast avsedda för engångsbruk. Använd inte om förpackningen är bruten eller om utgångsdatum har passerats.*
- *Transduktorn får endast visas utan omslag i illustrationssyften. Placera alltid ett skydd över apparaten för att skydda patienter och användare från korskontaminering.*

1. Placera en lämplig mängd gel inuti skyddet och/eller på transduktorns framsida. Om ingen gel används kan det resultera i dålig bildbehandling.
2. För in transduktorn i hylsan och se till att använda korrekt steril teknik. Dra tätt över skyddet på transduktorns framsida för att ta bort veck och luftbubblor. Var försiktig så att skyddet inte punkteras.
3. Sätt fast skyddet med de medföljande banden (om tillämpligt).
4. Undersök skyddet för att kontrollera att det inte finns några hål eller revor.



MPS GmbH
Borgasse 20
35619 Braunfels, Germany
Fax: 49 6442 32578

DEUTSCHER SICHERHEITSVERTRETER
(Produktversagen, Körperverletzung oder Todesfall)



Corporate Headquarters: 102 First Street South, Kalona, IA 52247-9589 USA
319.656.4447, 800.445.6741 | fax: 319.656.4451, 877.329.2482
www.civco.com

COPYRIGHT © 2010 ALL RIGHTS RESERVED. CIVCO IS A REGISTERED TRADEMARK OF CIVCO MEDICAL SOLUTIONS. CIVIFLEX, IVAS AND NEGUARD ARE TRADEMARKS OF CIVCO MEDICAL SOLUTIONS. ALL OTHER TRADEMARKS ARE PROPERTY OF THEIR RESPECTIVE OWNERS. ALL PRODUCTS MAY NOT BE LICENSED IN ACCORDANCE WITH CANADIAN LAW. PRINTED IN USA.

043-313L